

Hemostatos absorbibles

Solución eficaz para el control del sangrado en procedimientos dentales.



AEGIS LIFESCIENCES
PROTECTION THROUGH PERFECTION



2460

FDA

REGISTERED FACILITY



13485



SURGISPON® DENTAL

Para lograr la hemostasis inmediata en extracciones, cirugía de hueso oral y tejido blando

Al ser pH neutro, se puede utilizar en combinación con antibióticos y quimioterapéuticos sin reducir el efecto hemostático de la esponja.

Instrucciones de uso que deben leerse cuidadosamente antes de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS



Hecho de gelatina de grado farmacéutico altamente purificada.



Tiene porosidad uniforme y reacciona de forma neutra.



Se puede utilizar seco o saturado con solución salina estéril.



Sin toxinas, sin alérgenos, sin reacciones inmunes, sin efectos pirogénicos.



Completamente absorbido a las 4 semanas.



Absorbe aproximadamente 45 veces del propio peso de su sangre.



Esterilizado gamma y listo para usar.

BENEFICIOS CLAVE

Hemostasis rápida y fiable

- Apoya la formación estable de coágulos sanguíneos
- Elimina el riesgo de sangrado secundario
- Permite la adición de antibióticos para pacientes de alto riesgo (por ejemplo, fumadores, diabéticos, inmunocomprometidos)
- Actúa como un excelente portador, permitiendo la entrega localizada de analgésicos

Mitigación de la reabsorción de crestas alveolares

- Mantiene la forma del alveolo y la lámina vestibular
- Asegura la estabilidad del volumen alveolar

Mayor comodidad para el usuario y el paciente

- Fácil de usar: fácil de recortar y manipular
- Pasos de tratamiento simplificados
- Solución hemostática rentable

Regeneración ósea estable

- Se forma rápidamente un sitio de implante óseo estable
- Ayuda en la regeneración de tejidos



ALGUNAS APLICACIONES

Extracciones dentales

Detención de la exudación y sangrado del alvéolo

Control del sangrado profuso después de extracciones dentales

Como estructura para la liberación lenta de factores de crecimiento en la curación de los alveolos de extracción

Cirugía oral de hueso y tejidos blandos

Como matriz portadora (junto con medicamentos) en la regeneración ósea de defectos periapicales


Control del sangrado de la cavidad en la enucleación de los quistes

Cubo dental colocado en la cavidad para detallar



INFORMACIÓN DE PEDIDO

ID del producto	Nombre del producto	Dimensiones (mm)	No. de piezas por caja
SSP-101010	CUBOS	10 x 10 x 10	12
SSP-101010	CUBOS	10 x 10 x 10	24
SSP-101010	CUBOS	10 x 10 x 10	32
SSP-101010	CUBOS	10 x 10 x 10	50
SSP-1208	TAMPÓN	12 x Ø 08	32
SSP-202007	HOJA	20 x 20 x 07	20
SSP-2010	ENCHUFE	20 x Ø 10	10

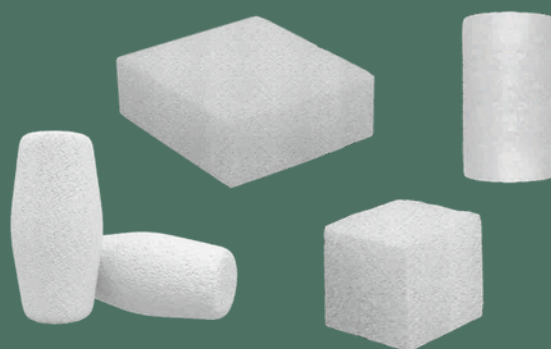

ID del producto	Nombre del producto	Peso	N° de contenedores por caja
SSP-01B	POLVO DE FUELLE	1 g	6
SSP-01	MASILLA EN POLVO	1 g	6



DENTOSPON®

- Compuesto de gelatina de espuma y plata coloidal finamente dispersa.
- La plata forma iones de plata en condiciones húmedas.
- Incluso pequeñas cantidades de estos iones son antimicrobianos, sin desarrollar resistencia.
- Dispositivo médico eficaz y biocompatible para un tratamiento fiable posterior a la extracción.
- Tanto hemostático como antibacteriano.
- Eficaz contra una amplia variedad de organismos grampositivos y gramnegativos (por ejemplo, *S. aureus*, *E. coli*, etc.)*.



CARACTERÍSTICAS

- Absorbe aproximadamente 45 veces el propio peso de su sangre
- Eficaz contra una amplia gama de bacterias debido a la plata coloidal
- Estabiliza el coagulum evitando así la aparición de huecos y cavidades secundarias
- Reduce la perturbación en la cicatrización de heridas
- Efecto de depósito extendido para resultados duraderos
- Reabsorción suave y completa en 4 semanas

*Estudio realizado por Aegis

Prueba in vitro de eficacia antimicrobiana del producto DENTOSPON® [Esponja de gelatina absorbible con plata coloidal 5 % (AGSS)] según el método de Zona de inhibición

Efecto antibacteriano in vitro del AGSS
N.º de organismos vs zona de inhibición

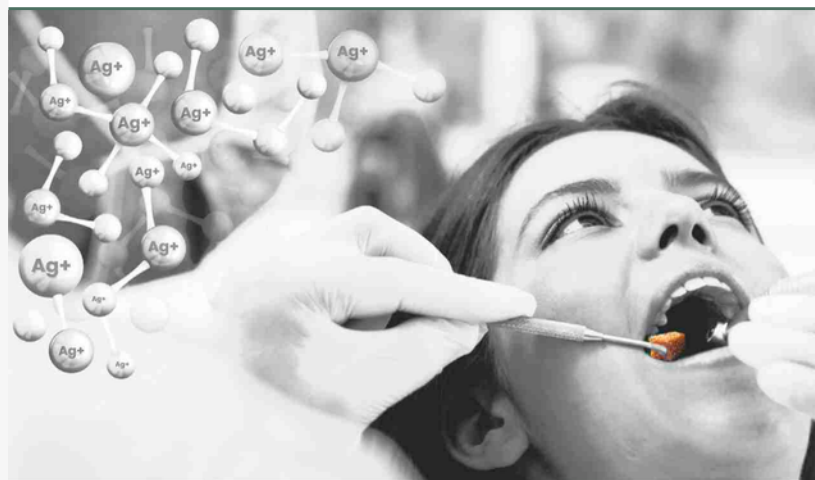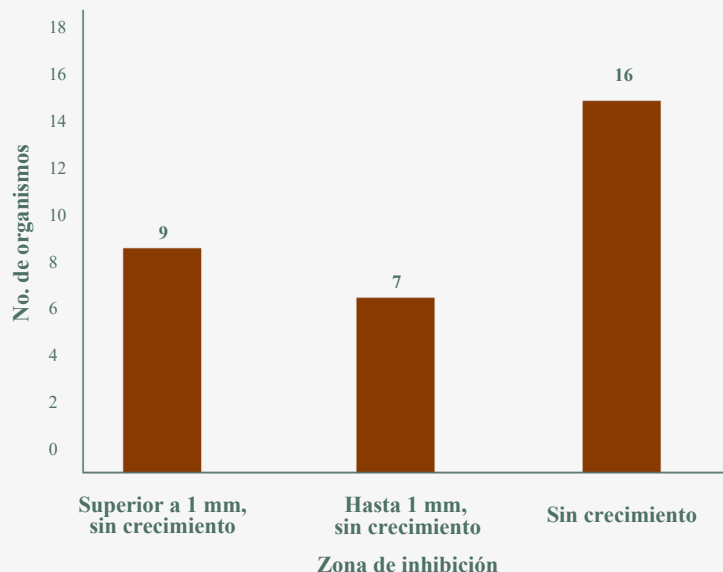

COMPOSICIÓN UNIFORME

Una esponja de gelatina DENTOSPON® contiene

Gelatina endurecida Ph. 9,5 mg

Plata coloidal Ph. 0,5 mg

APLICACIONES / INDICACIONES

Tratamiento de

Alvéolos y cavidades de la herida, por ejemplo, después

- Extracciones
- Amputaciones apicales
- Perforaciones del seno maxilar
- Otros tratamientos quirúrgicos (extirpación de tumores o dientes retenidos)

Profilaxis de

Formación de cavidades secundarias

Infecciones de heridas

Hemorragia secundaria

DENTOSPON® también se puede utilizar como apósito después de la gingivectomía y en periodontopatías.

¿CÓMO USAR?



Después de la extracción, se debe permitir que la sangre se acumule en el alvéolo.



Corte **DENTOSPON®** al tamaño requerido. Aplicar seco y no comprimir para mantener la capacidad de absorción total.



Coloque **DENTOSPON®** en la herida y la sutura.

¿CÓMO FUNCIONA DENTOSPON®?



Inserte **DENTOSPON®** en la herida



La esponja absorbe la sangre (equivalente a 45 veces su peso) sin ninguna hinchazón



La estructura de la esponja promueve la agregación de trombocitos



Estabilización del coágulo sanguíneo, se ajusta firmemente al entorno y previene la formación de espacios y cavidades secundarias



Efecto antimicrobiano prolongado (los iones de plata se liberan durante la reabsorción, dirigidos a una amplia gama de microorganismos)



Reabsorción completa (dentro de 4 semanas)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

ID del producto	Dimensiones (mm)	No. de piezas por caja
DSB-140707	14 x 7 x 7	50
DS-140707	14 x 7 x 7	24
DS-101010	10 x 10 x 10	24
DSB-101010	10 x 10 x 10	50




Surgi-ORC®

- Hemostato natural, absorbible a base de plantas, compuesto de celulosa regenerada oxidada
- Se utiliza para detener el sangrado capilar, venoso y arteriolar pequeño cuando la ligadura y otros procedimientos convencionales son ineficaces o poco prácticos
- **Es uno de los agentes de hemostasia tópica bioabsorbibles utilizados en cirugías generales y periodontales**

CARACTERÍSTICAS CLAVE

-  Celulosa de origen vegetal
-  El tejido ORC más denso de la variante de KNIT lo hace ideal para suturar en casos de sangrado más intenso
-  Hemostasis en 2-5 minutos
-  Totalmente absorbible en 28 días
-  Bacteriostático y bactericida
-  Resistente al deshilachado, fácil de cortar
-  Alta flexibilidad y drapeabilidad

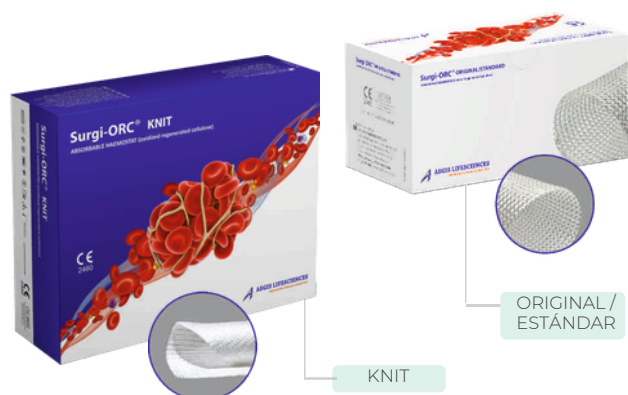


BENEFICIOS CLAVE

-  Absorbible y no interfiere con la curación
-  Fácil de usar con eficacia probada
-  No conlleva el riesgo de transmisión de infecciones virales que tienen los productos a base de proteínas de coagulación sanguínea

¿DÓNDE USAR Surgi-ORC®?

- Cirugía periodontal
- Hemorragia posextracción
- Alveolitis posextracción (alveolitis seca)

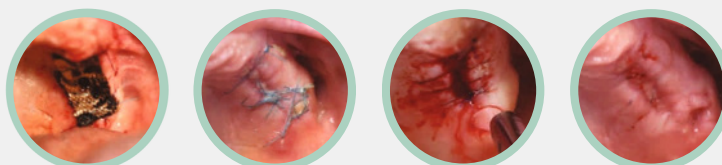

Etapas secuenciales de aplicación del KNIT **Surgi-ORC®** y reabsorción completa durante la cirugía dental, demostrando hemostasia exitosa.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

ID del producto	Dimensiones (pulgadas)	Dimensiones (cm)	No. de piezas por caja
Surgi-ORC® ORIGINAL/ESTÁNDAR			
SOO-0203	2 x 3	5.1 x 7.6	12
SOO-502	0.5 x 2	1.3 x 5.1	12
Surgi-ORC® KNIT			
SOK-0101	1 x 1	2.5 x 2.5	12
SOK-0103	1 x 3	2.5 x 7.6	12
SOK-0135	1 x 3.5	2.5 x 8.9	12

FLOGEL®

Fluid gelatin hemostatic matrix made from absorbable gelatin sponge powder, in a fluid form pre-filled in a syringe.


La naturaleza fluida de **FLOGEL®** le permite adaptarse a cualquier geometría de herida irregular y aplicarse en lugares de difícil acceso.



CARACTERÍSTICAS CLAVE


- Mantiene una viscosidad uniforme después de mezclar con solución salina/trombina
- Listo para usar en 30 segundos una vez que la solución salina estéril esté disponible en el campo estéril
- El producto, después de su constitución, envuelve el sitio del sangrado para detenerlo más rápidamente
- Proporciona hemostasia mecánica a través del efecto taponamiento, ejerciendo presión localizada en el sitio de sangrado para una formación de coágulos más rápida y eficaz
- Tiene una eficacia, seguridad y eficiencia comprobadas en todos los procedimientos quirúrgicos
- Se mantiene en su lugar durante el sangrado activo incluso después de mezclar con solución salina/trombina, por lo que proporciona hemostasia más rápida donde está previsto
- Es fácil de usar y se puede aplicar localmente en el sitio objetivo del sangrado
- Se absorbe completamente

Para el manejo del sangrado posoperatorio en pacientes en Eliquis después de la cirugía periodontal

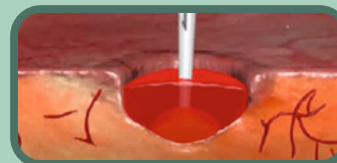


No inyecte FLOGEL® Matrix en los vasos sanguíneos, Aplique FLOGEL® directamente sobre la fuente del sangrado.

No está destinado a uso profiláctico.

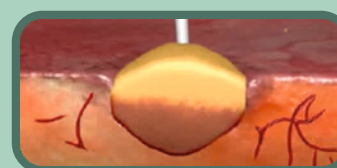

Use cantidades adecuadas de FLOGEL® para cubrir completamente el defecto del tejido (como en las laceraciones del vestíbulo)*.

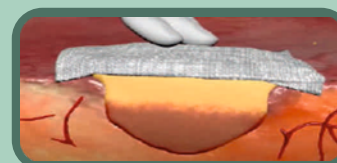

Contenga inmediatamente FLOGEL® en el sitio con una gasa húmeda y una aproximación suave durante 2 minutos para beneficiarse del efecto del taponamiento.



Siempre irrigue suavemente el exceso de FLOGEL® lejos y succione fuera de la herida.

*También se puede utilizar para el sulcus gingival.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

ID del producto	Nombre del producto	Volumen (ml)	No. de piezas por caja
FG-005/006/008/010	Kit de matriz hemostática de gelatina fluida	5/6/8/10	1



Hemostasis dental. Simplificada.

Presentamos una amplia gama de hemostatos absorbibles

Simplicidad no significa menos, significa hemostasia confiable, absorción eficiente y mayor confianza en el procedimiento.

SURGISPON® Dental, DENTOSPON®, Surgi-ORC® y FLOGEL® son hemostatos estériles y absorbibles hechos de biomateriales naturales altamente purificados, incluyendo gelatina (derivada del colágeno) y celulosa regenerada oxidada.

También apoyan la administración localizada de fármacos como portadores de antibióticos o analgésicos, reduciendo la necesidad de administración sistémica.



info@dspdent.com

www.dspdent.com